

REAL[®] 6100

RÖRELSEFRIHET OCH VALFRIHET

När benen är svaga behöver man en stol att både sitta i och förflytta sig med. Stolen ska ge en ergonomiskt riktig sittställning och ta sig fram där man vill. Real 6100 är en elektriskt framdriven arbetsstol för inomhusbruk.

REAL 6100 är konstruerad för att ge användaren maximal rörelsefrihet i hemmet, på arbetet eller i skolan. Den elektriska höjdregeringens intervall är hela 28 cm. Detta möjliggör rätt sittställning både vid skrivbordet och vid höga arbetsytor. Drivning på mitthjulen innebär att stolen kan vända runt sin egen axel. Individuell hjulupphängning gör att REAL 6100 klarar hinder upp till 40 mm. Den delas med ett enkelt handgrepp för transport i bilens lastutrymme

Anpassningsmöjligheter

REAL 6100 har stora möjligheter att anpassas efter användarens behov och önskemål. I standardutförande är stolens armstöd fällbara för att möjliggöra enkel sidoförflyttning i och ur stolen. Benstödet har en stabil fotplatta och är justerbart i höjd och vinkel. REAL 6100 kan levereras med samma tillval och tillbehör som Mercado Medics breda och beprövade REAL 9000-system. Man kan välja mellan olika typer av sits- och ryggvinklingar, alternativa sitsstorlekar, ErgoMedic Plus sittsystem, samt tillbehör som sidostöd och

knästoppar mm. Stolen kan beställas med el-sitsvinkel, el-ryggvinkel och el-benstöd.

REAL 6100 är även förberedd för enkel eftermontering av ovan elfunktioner.


Manöverbox DX G90A

Från den översiktliga manöverboxen styr man REAL 6100. De flesta funktioner styrs med en joystick. Den är monterad på en ledad arm och är lätt att flytta i sidled. Manöverboxen kan enkelt flyttas till valfri sida av stolen. Manöverboxen DX G90A har bland annat nya bildsymboler för elfunktionerna. Stolens köregenskaper är programmerbara. Det går bl a att ställa in acceleration, maxhastighet och joystickens känslighet. Detta görs enkelt med en behändig programmeringsdosa som kopplas till manöverboxen.



Ny manöverbox DX G90A

REAL[®] 6100

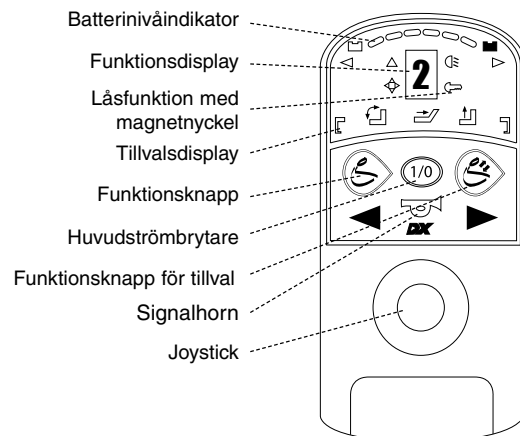

Manöverbox DX G90 A
Art.nr 802709

Ny manöverbox 0604



TEKNISKA DATA OCH MÅTT

DATA

Max hastighet.....	4,5 km/h
Vändutrymme 180°.....	870 mm
Drivhjul.....	Båda mitthjulen
Körtid per laddning.....	ca 8 timmar
Hindertagningsförmåga.....	40 mm
Vikt.....	74,5 kg inkl. batt.
Laddningstid.....	ca 6-8 timmar
Laddare provade och godkända av Mercado Medic AB.....	Mentzer 3A
Batterier provade och godkända av Mercado Medic AB.....	Sonnenschein 2st 12V 25 Ah


STANDARDMÅTT

Totalbredd.....	650 mm
Längd.....	740 mm
Hjul fram/bak.....	125 mm
Drivhjul.....	210 mm
Sitthöjd.....	490-770, 440-640 mm
Benstödslängd.....	370-530 mm
Sittbredd.....	330-480 mm
Sittdjup.....	350-480 mm
Sittlutning.....	-2°
Ryggstödshöjd.....	360-420 mm
Ryggstödslutning.....	-15-+45°

PROGRAMMERINGSENHET

Funktioner som kan programmeras:

- Hastighet framåt
- Acceleration framåt
- Bromssträcka framåt
- Hastighet bakåt
- Acceleration bakåt
- Bromssträcka bakåt
- Svänghastighet
- Svängacceleration
- Sväng inbromsning
- Känslighet i joystick
- Användning av extern joystick
- Omvänd funktion för joystick

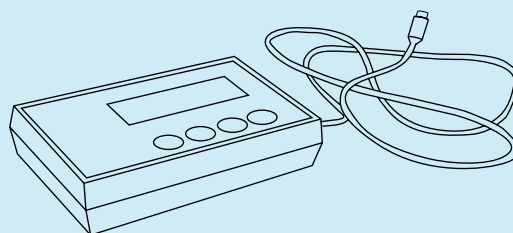

Mercado Medic AB
Tryffelslangan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se