

# **ERGOMEDIC® PLUS**

## ERGONOMI UTÖVER DET VANLIGA

Kravet på sitsens egenskaper, som är grunden för att kunna skapa god ergonomi, är att den är stabil och bekväm. Det nya komfort-sittsystemet för Real 9000 Plus & 6100, ErgoMedic® Plus, har vad som krävs.



Real 9000 Plus

ERGOMEDIC® PLUS sitsen har mycket form, kombinerad med rätt mjukhet, just för att stabiliteten och komforten skall vara optimal. Den är högre under låren än under stjärten. Dess form fördelar trycket bättre mot lår och stjärt och hindrar också att man kanar fram när sitsen vinklas lätt framåt.

När stjärten placeras långt bak på sitsen, så att bäckenet har god kontakt mot ryggstödet nedre delar, stabiliseras även benen. Den högre, rundade formen på varje sida om låren, stabiliserar både bäckenet och benen.

### ErgoMedic® Plus ryggplattor

ERGOMEDIC® PLUS ryggen finns i två varianter. Det högre ryggstödet har mer form runt bäckenet och bröstkorgen - det lägre har samma formgivning men kontakter främst bäckenet och ländryggen.

Det höga ryggstödet nedre del är uppåt konvex så att man kan sitta med bäckenstöd även om

ryggstödet är vinklat bakåt.

Högst upp i mitten, mellan skulderbladen, har vi byggt in ett mjukt extra stöd. Anledningen är att man skall kunna sitta uppsträckt och stabilt mot ryggstödet, samtidigt som skuldrorna är fria. Ryggstödet sidor är väl formade framåt för att stabilisera bäckenet och bröstkorgen. Det låga ryggstödet har likadan formgivning som det höga men formen är fokuserad kring bäckenet och ländryggen.

# **ERGOMEDIC® PLUS**


1



2




3

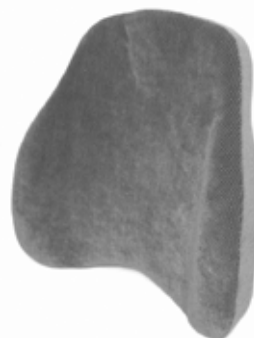

4



5

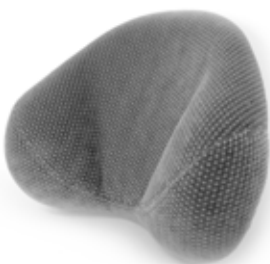

## Armstöd Plus

De nya armstöden gör sittandet stabilare. Den som sitter bör kunna växla mellan aktivitet (muskel-spänning) och avspänning. Armstöden är formade så att armarna får stöd från sidorna vilket medför att överkroppen blir mer avspänd. De är även uppbyggda under handleden för att ge extra avlastning.

Längst fram är armstödet rundad-konvex vilket gör det bekvämt att vila handen där, samtidigt som man får ett bra grepp då man ska i- och ur stolen.

## Nackstöd Plus

Nackstödet ger stöd främst mot huvudets bakre nedre del. Stödets nedre del är uppbyggd med en mycket mjuk kudde på var sida. Dessa ger sedan ett stöd mot mjukdelarna under skallbenet. Den övre delen är mer plan vilket medför att det är enkelt att vrida på huvudet. Nackstödet form och egenskaper innebär att huvudet blir perfekt stabiliserat också när man sitter upprätt.

## SPECIFIKATIONER

- Sitsar (33x35-48x48 cm)
  - Ryggar (40x20, 35x43, 42x43 cm)
  - Nackstöd (30x23 cm)
  - Armstöd (42 cm)
- \*Alla artiklar ovan går att få i specialutförande.

- 1 Sits ErgoMedic PLUS
- 2 Låg rygg ErgoMedic PLUS  
40x20 cm
- 3 Hög rygg ErgoMedic PLUS  
42x43 cm/35x43 cm
- 4 Armstödsplatta ErgoMedic PLUS  
42 cm
- 5 Nackstöds kudde ErgoMedic PLUS  
30x23 cm