



REAL 8100 RÖNTGEN

Funktionell och smidig



Valid from 070601

Mercado 100329

Article nr 803385



FUNKTIONELL STOL – RATIONELL UNDERSÖKNING.

På en röntgenstol ställs höga krav. Den måste uppfylla de behov läkare, sjuksköterskor och patienter har. För att kunna effektivisera undersökningen med patienten i sittande ställning ska stolen vara funktionell och enkel att ställa in. Röntgenstolen måste också fungera väl med röntgenutrustningen i övrigt. Om stolen dessutom är bekväm och kan erbjuda patienten en ergonomiskt riktig positionering, blir undersökningen mer tidsbesparande. För patientens säkerhet ska stolens konstruktion vara stabil - men samtidigt smidig för personalen att hantera.

Lättanvänd


REAL RÖNTGENSTOL 8100 är en svensktillverkad elektrisk stol anpassad för röntgenbruk. Den är konstruerad med tanke på ergonomi, funktion och flexibilitet. Stolen är bekväm, stabil och lättskött. Med hjälp av en fjärrkontroll regleras den hela 28 cm elektriska höjdställningen. Det ger personalen frihet att manövrera stolen även på avstånd.

Säker och smidig

För patientens säkerhet har REAL RÖNTGENSTOL 8100 ett smidigt nydesignat helsvetsat underrede med en

lätthanövrerad och säker broms. Stolen bromsas enkelt med hjälp av en pedal eller spak (alternativt elektriskt via fjärrkontroll). Vid bromsning av stolen - placera bromsfötterna i fixeringspunktsbrickorna. Brickorna skall i förväg vara fastmonterade i golvet.

Den mekaniska gradskivan ($\pm 90^\circ$ med 5 graders intervall) medför möjlighet att röntga patienten i önskad vinkel. Sitsens rotation frigörs då man belastar fotreglaget på stativets baksida.





BEKVÄM FÖR PATIENTEN

För att öka sittkomforten har Mercado Medic tillsammans med leg. Sjukgymnast Bengt Engström utvecklat sittsystemet ERGOMEDIC. För optimal sittkomfort är ERGOMEDIC-sitsen lite högre under låren än under stjärten. Sitsens form fördelar trycket väl och förhindrar att man kanar fram, även då sitsen vinklas framåt. Sitsens bakkant är låg för att öka sittdjupet. Det medför att sittbensknölnarna kan röra sig bakåt när man sträcker på ryggraden.

Rätt positionering

Med hjälp av den vinkelställbara sitsen (ställbar fram- och bakåt) finner du enkelt rätt position för patienten.


Flexibilitet med olika ryggar



Det låga ryggstödet är anpassat för röntgen av länd- och bröstrygg. Det höga ryggstödet med nackstöd i makrolon lämpar sig för röntgen av halsrygg. Kolfiberryggstödet är främst framtagna för skoliospatienter. Det ger stöd för patientens svank, länd-, bröst-, halsrygg och nacke. Denna ryggplatta är dock

”all-round” - och fungerar även bra till en rad andra behov - tex lungröntgen. Man behöver då inte skifta ryggstöd för olika patienter och moment. Samtliga ryggstöd är enkla att skifta. De är även reglerbara i höjd, vinkel och djup. Som tillbehör har vi väggfästen för de ryggar som inte är monterade på stol.

Standard- eller komfortutförande

REAL RÖNTGENSTOL 8100 levereras i ”standard-” eller ”komfortutförande.” I komfortutförande ingår elektrisk sitsvinkel och elektrisk broms. Dessa funktioner regleras naturligtvis via fjärrkontrollen.





Valfrihet



Som tillval för effektivare undersökningar finns tex alternativa sits-storlekar, fotstöd, positioneringsbälte och hög kolfiberrygg. Den fällbara fotringen ger ett bekvämt fotstöd. Lätt att fälla upp.

Vi kan nu erbjuda en ny vidareutvecklad sits som tillval till REAL 8100 EL (SE BILD OVAN). Denna sits har en inbyggd bakkant som medför att patienten snabbare finner en korrekt positionering. Den kan ersätta den låga ryggplattan 33x16 cm.

Detta medför ett färre antal handgrepp och tillbehör till stolen och en snabbare och mer effektiv undersökning.

Svensk kvalite'

REAL RÖNTGENSTOL 8100 utvecklas och tillverkas i Sverige. Stolen är EMC testad på SEMKO och godkänd enligt EN 60601-1-1 samt EN 60601-1-2. PLUS-stativet är provat på SP och godkänt enligt EN: 1335. Högt ställda kvalitetskrav borgar för många års trygg användning.

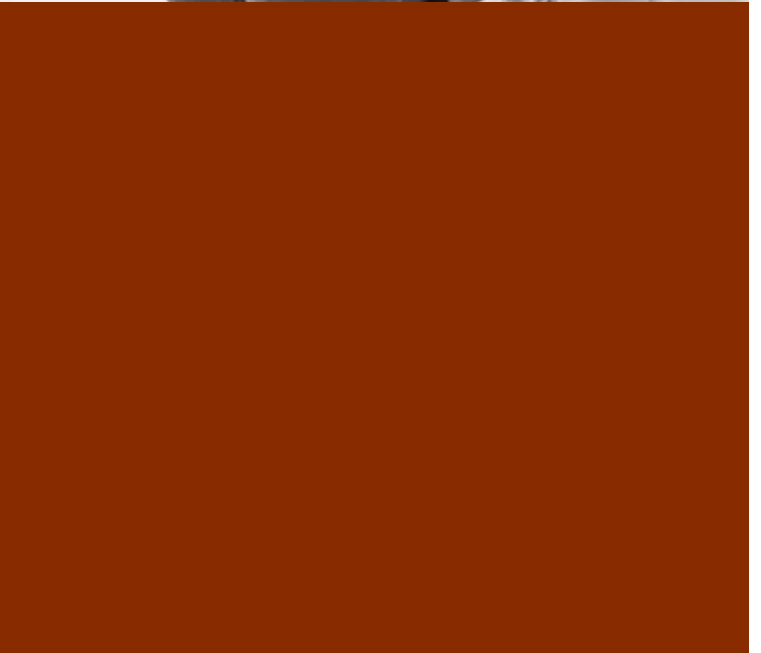



STANDARDUTFÖRANDE

- Elektrisk höj-/sänkning med fjärrkontroll
- Sitthöjd 47-75 cm med rotation
- Helsvetsat nydesignat stativ "klinik" med gradskiva.
- Fot- och handbroms.
- Hjul 100 mm SL (fler alternativ finns).
- Vevreglerad sitsvinkling
- Rygg 33x16 cm.
- Hög rygg med ställbar kudde och nackstöd i makrolon.
- Sits 44x48 cm (fler alternativ finns).
- Armstöd fällbara 35 cm (fler alternativ finns).
- Fixeringspunktsbrickor till broms.
- Klädsel konstläder.

COMFORTUTFÖRANDE

- Elektrisk höj-/sänkning med fjärrkontroll.
- Sitthöjd 47-75 cm med rotation.
- Helsvetsat nydesignat stativ "klinik" med gradskiva.
- **Elektrisk broms.**
- Hjul 100 mm SL (fler alternativ finns).
- **Elektrisk sitsvinkling**
- Rygg 33x16 cm.
- Hög rygg med ställbar kudde och nackstöd i makrolon
- Sits 44x48 cm (fler alternativ finns)
- Armstöd fällbara 35 cm (fler alternativ finns)
- Fixeringspunktsbrickor till broms
- Klädsel konstläder.

