



VALFRIHET

Tillval/Tillbehör till REAL 9000 PLUS & REAL 6100, Barn & Vuxen



Citig från 090401

Senast ändrad 120116

Artikelnummer: 803305



1



12



14



13

TILLVAL/TILLBEHÖR

På en systemstol ställs höga krav. Den måste vara bekväm och säker att sitta i, samtidigt som den är enkel att förflytta sig med. För att kunna anpassa stolen till varje enskild brukare måste det även finnas ett brett och väl genomtänkt sortiment av tillval och tillbehör. REAL 9000 PLUS är en systemstol, moduluppbyggd för enkel individuell anpassning. Genom REAL-stolens många alternativ och tillbehör låter man användarens behov bestämma utförandet.

Valfrihet

En individuellt anpassad stol gör det lättare att leva ett aktivt liv hemma och på arbetsplatsen. Man kan till REAL-stolen välja olika typer av sits- och ryggvinklingar, alternativa sits- och ryggstorlekar, olika hjul, fixlyftomater, el-lyftomater samt en mängd olika tillbehör.

Stativ

För att tillgodose olika behov så finns stativen i flera utföranden. Vårt kliniskstolsstativ med inbyggd fotbroms. Stolen går att bromsa utan att man behöver böja sig neråt efter bromsspaken.

PLUS-STATIVET är smidigt och lämnar stort utrymme för benen samt förenklar avsevärt möjligheten att förflytta sig sittandes i stolen.

H-STATIVET ger extra utrymme för fötter och benstöd. Benstöden monteras främst på H-stativ och kan kompletteras med vadstöd och knästoppar.

Fotring

Fotringen fungerar som ett stöd för fötterna då avlastning behövs. Den är enkel att fälla upp eller ned efter behov, exempelvis vid förflyttning då man behöver utrymme för fötterna. Fotringen finns i två utföranden och passar till samtliga REAL 9000-stolar med Plus-stativ.

Stativförlängare

En stativförlängare ger stolen ökad stabilitet och förhindrar att den tippas. Väldigt bra tillval om brukaren är spastisk.

Bromsspak

Bromsspakar finns i olika längder och kan placeras på höger eller vänster sida. Reumatikerkryss monteras på bromsspaken. Det förenklar bromsning av stolen för de som finner det svårt att nå bromsspaken i normala fall. Det finns även elbroms.



Nr	Stativ	Art.nr	Nr	Fotringar för stativ 9000 PLUS	Art.nr
1	Stativ 9000 PLUS 48 (vuxen) 100 XL Stativ 9000 PLUS 48 (vuxen) 100 SL Bromspedal för Plusstativ	802659 802660 802865	10	Fotring 1/8, uppfällbar Hö, PLUS 48 Fotring 1/8, uppfällbar Vä, PLUS 48 Fotring 1/8, uppfällbar Hö, PLUS 43 Fotring 1/8, uppfällbar Vä, PLUS 43	802984 802985 802986 802987
2	Stativ 9000 PLUS 43 (barn) 100 XL Stativ 9000 PLUS 43 (barn) 100 SL	802657 802658	11	Fotring 1/4, uppfällbar, PLUS 48 Fotring 1/4, uppfällbar, PLUS 43	802704 802988
3	Stativ 9000 H vårdarmanövrerat	802295	12	Körhandtag PLUS	803264
4	Stativförlängare Bak för PLUS, Par Stativförlängare Fram för PLUS, Par	802871 802936	13	Körbygel PLUS	803263
5	Elbroms monterad på PLUS-stativ, EL Elbroms monterad på PLUS-stativ,	802965 803077	14	Fyrbroms kit till PLUS-stativ 43/48 inkl. stativförlängare fram. *OBS! Ej komplett stativ	803503
6	Stor kula till handbromsspak	801625			
6	Reumatikerkruss	800785			
7	Handbromsspak för PLUS-stativ, 35 cm 45 cm 55 cm	802866 802868 800885			
8	Bromsspaksfäste för PLUS-stativ, justerbart i bredd, 7 hål Bromsspaksfäste för PLUS-stativ, justerbart i bredd, 2 hål	802800 802799			
9	Eldonssats för elbroms PLUS-stativ	803037			

13



12



31

■ Tillbehöret passar även till REAL 6100

FÖR INDIVIDUELL ANPASSNING

Hjul

XL-HJULET 100 mm är standard och används främst för linoleum och mellanhårda golv.

SL-HJULET är mycket lätttrullat och har dubbla kullager. Det fungerar bäst på hårda golv som tex. parkett och betonggolv.

BSL-HJULET är ett SL-HJUL med en bredare hjulbana. 125- OCH 150 MM HJULEN är bra vid förflyttning över trösklar och trall mm.

Adapter

Benstödsadapterar finns till rullstolsbenstöden: Cross och Comfort. Om man vill montera på egna benstöd på produkten så är det möjligt med dessa. Adaptern monteras på armstödens breddjusteringsbåge.

Vadstöd

Vadstöden fungerar som ett extra stöd för vaderna då benstöden inte räcker till för att stabilisera benen. Vadstöden finns i olika utföranden för respektive benstöd och vadstödsmekanismen monteras enkelt med fästen på benstöden.

Benstöd Medic

Benstöd i form av hel eller delad fotplatta finns i fyra storlekar: S, M, L och XL. De är ställbara i höjd-, vinkel- och djupled. Fotplattornas mått är desamma på S-XL. Även fotplattan kan ställas i vinkel.

Även mittmonterat benstöd "Mobil" finns för vuxen och barn. Benstöden monteras främst på H-stativ och kan kompletteras med vadstöd och knästoppar. Benstöden monteras i ett benstödsfäste (fyrkantör) under sitsen.

Knästoppar

Korrigerande av ben och fötter kan ske med hjälp av justerbara knästoppar, som kan regleras till brukarens benlängd. Knästopparna hindrar brukaren från att glida framåt och monteras på benstöd Medic och är utfällbara och justerbara i höjd- och djupled. Knästoppskuddarna finns att få i olika material och färger.



Nr	Knästoppar (par, monteras på benstöd)	Art.nr
12	Knästoppskudde, svart konstläder	KS1038
13	Knästoppsmekanism Par	800828

Nr	Adaptrar för rullstolsbenstöd	Art.nr
14	Adapter för rullstolsbenstöd Cross, Hö	801237
	Vä	801236
	Par	801600
15	Adapter för rullstolsbenstöd Comfort, Hö	802076
	Vä	802075
	Par	802091

Nr	Benstöd Medic	Art.nr
18	Benstöd Mini Medic helt S (18-24 cm)	802915
	M (23-32 cm)	802916
	L (28-41 cm)	803147
	XL (38-51 cm)	803148
18	Benstöd Mini Medic delat S (18-24 cm)	802917
	M (23-32 cm)	802918
	L (28-41 cm)	803141
	XL (38-51 cm)	803144
19	Benstöd Medic delat, Par S (18-24 cm)	800804
	M (23-32 cm)	800805
	L (28-41 cm)	800808
	XL (38-51 cm)	800811

19	Benstöd Medic helt	S (18-24 cm)	800814
		M (23-32 cm)	800815
		L (28-41 cm)	800816
		XL (38-51 cm)	800817

20	Vadstödsmechanism för Medic benstöd	802214
	Tillhörande vadstöds-kudde	CS1038

Nr	Övriga benstöd	Art.nr
21	Benstöd mobil 6100, L (37-53 cm)	600106
	Benstöd mobil 6100, S (30-38 cm)	600254
22	Benstöd "Mobil" m vadstöd och hälkåpor	999008
23	Benstöd mobil Mini 6100, L (37-53 cm)	600319
	Benstöd mobil Mini 6100, S (30-38 cm)	600320
24	Benstöd "Comfort" EL Hö	802437
	Vä	802436
	Fäste för benstöd "Comfort" EL	802979

Nr	Hjul	Art.nr
25	Standardhjul, XL 100mm	801213
26	Extra lätttrullat länkhjul, SL 100 mm	801144
28	Extra brett lätttrullat länkhjul, BXL 100 mm	803162
29	Länkhjul, 125 mm	800904
30	Länkhjul, 150 mm	800905

31	Benstöd mittmonterat kpl 37-53 cm	600337
	Fotplatta djup 100 mm	
	Benstöd mittmonterat kpl 30-38 cm	600338
	Fotplatta djup 100 mm	
32	Sarg till fotplatta mobil 6100	803211



SITTPLATTOR & SITSVINKLINGAR

Sittplattor

ERGOMEDIC sitsen är framtagen för optimal sittkomfort, då den är utformad lite högre under låren än under stjärten. Sitsens form fördelar trycket väl och förhindrar att man kanar fram, även då sitsen vinklas framåt.

ERGOMEDIC PLUS-sitsen har mycket form, kombinerad med rätt mjukhet, just för att stabiliteten och komforten skall vara optimal. Även denna sits är utformad så att den är högre under låren än stjärten. Den högre rundade formen på varje sida om låren stabiliserar både bäckenet och benen.

COXITSITS är delad med individuellt reglerbara klaffar. Den används främst vid lindring-/rehabilitering av ortopediska skador i höft och lårben.

ERGOMEDIC SLOWRECOVERY är tillverkad av två olika material. Det översta så kallade Slow recovery materialet formar sig och ger en bra tryckfördelning och ökad sittkomfort.

Sits träplatta ska användas vid ingjutning eller eftermontering av sittskal. Sits med antiglid rekommenderas vid användning av olika individuellt anpassade sittedynor. Sits med hygienväv bör användas av brukare med inkontinensproblem. Komplettera med överdrag i plysch.

Sitsvinkling

Mercados gasfjäder och elreglerade vinklingar kan placeras på fler platser än under sits eller armstöd. När sitsen vinklas följer även ryggplattan med som stöd.

Kontakta Mercado för fler alternativ som passar dina eller din brukares behov.

VEVREGLERAD SITSVINKLING regleras av personalen med vev som kan låsas i fasta lägen. Är ett bra alternativ då gasfjäderreglerad sitsvinkling inte fungerar. Passar bra till ortopedkliniker där patienten ska sitta i ett visst gradantal, eller i skolmiljö till barn som behöver sitta aktivt.

GASFJÄDERREGLERAD SITSVINKLING UNDER SITS gör att brukaren kan själv justera sitsvinklingen mellan aktivt och passivt sittande.

Då den GASFJÄDERREGLERADE SITSVINKLINGEN sitter under armstödet kan brukaren enkelt justera sitsvinklingen mellan passivt och aktivt sittande. Förenklar även uppresning då sitsen är i framåtvinklat läge.

ELREGLERAD SITSVINKLING UNDER ARMSTÖD är mycket lättåtkomlig för brukaren och är lätt att ställa i fasta lägen. Bra alternativ för brukare som ej själva kan justera sin tyngdpunkt.

35



36



37



40



38



39



■ Tillvalet passar även till REAL 6100

Nr	Sittplattor	Art.nr
31	Samling sittplattor	
32	Sits träplatta	ST10xx90
33	Sitsplatta med antiglid	ST10xx61
34	Sits ErgoMedic med hygienväv	STxxxx60

Kontakta Mercado, eller se broschyren 'Sittsystem' för mer information om sittplattor.

Nr	Sitsvinkling	Art.nr
35	Gasfjäderreglerad sitsvinkling, reglage under armstöd	802767
36	Förberedd för sitsvinkling	802236
37	Elreglerad sitsvinkling (reglage under armstöd)	
38	Vevreglerad sitsvinkling under sits Komplett sats för vevreglerad sitsvinkling	800829
39	Eldonssats för sitsvinkel	802730
40	Ställbart förstärkt sittkryss 9000, +15°/-23°	

(ställbart i tre lägen) Vuxen Br 40-54 cm 803070
Barn Br 33-39 cm 803071

Ställbart förstärkt sittkryss 6100, +15°/-23°
(ställbart i tre lägen) Vuxen Br 40-54 cm 803072
Barn Br 33-39 cm 803073

FÖRKLARING TILL ARTIKELNUMRETS UPPBYGGNAD

Art.nr: ST101546
"Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"

Siffror 1-2 = Typ av stoppningsartikel
Siffror 3-4 = Sittsystem
Siffror 5-6 = Storlek
Siffror 7 = Material
Siffror 8 = Färg

Se Mercados broschyr 'Styrka och Funktion' för mer information om den elreglerade sitsvinklingen.



RYGGPLATTOR & RYGGMEKANISMER

Ryggplattor

ERGOMEDIC ryggens höga formgivning och vinkling har förändrats för att ge mer plats åt bäcken och dess mjukdelar. Ryggplattans nederkant är lätt U-formad och mjukare än tidigare.

ERGOMEDIC PLUS ryggen finns i ett antal varianter. Ett högre ryggstöd som har mer form runt bäckenet och bröstryggen. Högt upp i mitten, mellan skulderbladen, finns ett extra mjukt stöd inbyggt för att man skall kunna sitta uppsträckt och stabilt mot ryggstödet samtidigt som man har skulderna fria. Det höga ryggstödet finns även med extra sidokilar.

Ett lägre ryggstöd med samma formgivning som det högre, men som främst fokuserar på bäcken och ländrygg.

Kontakta Mercado eller se broschyren 'Sittsystem' för mer information.

Ryggmekanism

MEDIC RYGGMEKANISM ger möjlighet att utöka sitsdjupet på ett mer effektivt sätt än med standard ryggmekanism. Det behövs t.ex. om brukaren är kraftigt kufotisk.

För att få upp huvudet justeras ryggen bakåt och ryggplattan

vinklas för att ge bästa möjliga stöd och på så sätt förhindra att överkroppen vill falla framåt.

Fördelen med Medic ryggmekanism är att vinkeljusteringen är i nedkant på ryggplattan. Det medför att vinkeljusteringen av ryggplattan inte inskränker på sitsdjupet och dessutom ger ett stöd i ryggen. Det centrerar automatiskt brukaren i sidled p.g.a. att stödet i ryggen fördelas på hela ryggens bredd i underkant.

COMFORT RYGGMEKANISM kan justeras i höjd, djup och vinkel med hjälp av gasfjäderreglage. Ryggen blir fjädrande mjuk och brukaren kan själv förändra sitt sitsdjup sittandes i stolen.

Låg rygg är en ergonomiskt rätt formad ryggplatta som ger ett bra stöd åt svanken och tar upp rundningen i korsryggen. De låga ryggarna lämnar god rörelsefrihet för överkroppen.

Hög rygg ger ännu mer stöd och stadga speciellt uppåt utan att vara för hög och hindra överkroppens samt skuldernas rörelser. Våra höga ryggar kan även fås med utbyggt svankstöd.

Extra hög rygg ger utöver ett bra svankstöd även ryggplattan stöd högre upp i bröstryggen. Ryggen smalnar upptill för att inte låsa skulderbladen i arbetssituation.



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51

■ Tillvalet passar även till REAL 6100

Nr Ryggplattor

41 Blandade ryggplattor

Kontakta Mercado, eller se broschyren 'Sittsystem' för mer information om ryggplattor.

Nr Ryggmekanismer

Nr	Ryggmekanismer	Art.nr
42	Standard ryggmekanism, Låg rygg	801748
43	Standard ryggmekanism, Hög rygg	801747
44	Medic ryggmekanism, Låg rygg 112, S 200 mm	801930
	L 240 mm	801739
	XL 300 mm	801934
	Medic ryggmekanism, Låg rygg 155, S 200 mm	801929
	L 240 mm	801738
	XL 300 mm	801933
45	Medic ryggmekanism, Hög rygg 112, S 200 mm	801932
	L 240 mm	801741
	XL 300 mm	801936
	Medic ryggmekanism, Hög rygg 155, S 200 mm	801931
	L 240 mm	801740
	XL 300 mm	801935
46	Comfort ryggmekanism, Låg rygg, Grund	801743
	Djup	801745

47 Comfort ryggmekanism, Hög rygg, Grund 801742
Djup 801744

48 Elreglerad ryggmekanism mont. m. Låg rygg
Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Låg rygg 801265

49 Elreglerad ryggmekanism mont. m. Hög rygg
Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Hög rygg 800841

50 Eldonssats för ryggvinkel 802731

51 Dubbel Medic ryggmekanism
Ryggfällning fäste Medic 802859
Ryggfällning Medic, L 155mm (2 st) 801082
Ryggfällning Medic, L 112mm (2 st) 801083
Ryggfällning Medic, XL 155mm (2 st) 801084
Ryggfällning Medic, XL 112mm (2 st) 801085
Ryggstolpe Medic Dubbel 802860
Ryggmekanism Dubbel Medic kpl 803585
L 155 mm, 240 Hög rygg
Ryggmekanism Dubbel Medic kpl 803586
L 155 mm, 340 Hög rygg

Se Mercados broschyr 'Styrka och Funktion' för mer information om den elreglerade ryggmekanismen.



ARMSTÖDSPLATTOR & ARMSTÖD

Armstödsplattor

Armstöden är en mycket viktig del i ERGOMEDIC-systemet, de bidrar till den höga komforten. Dessa har därför utvecklats mer ergonomiskt. Kanterna har fasats av, både på in och utsidan. Detta för att trycket mot underarmarna ska minimeras vid långvarig kontakt. Armstödsplattan är skålad baktill för att armbågen ska ligga stabilt. Framtill är den formad för att ge ett bra grepp vid uppresning och överflyttning.

COMFORTARMSTÖD är ett något bredare armstöd med mjukare stoppning. Det gör det lättare att vila armarna på armstöden.

HEMIPLEGIARMSTÖD passar brukare med delsidesförlamning. Skålningen i armstödsplattan gör det lättare att hålla den förlamade armen på armstödet. Armstödsplattan är roterbar för bästa möjliga positionering.

ERGOMEDIC PLUS armstöden är formade så att armarna får stöd från sidorna vilket medför att överkroppen blir mer avspänd. De är även uppbyggda under handleden för att ge extra avlastning.

Armstödsmekanism

ARMSTÖDSMEKANISM 9000 PLUS går att justera i höjdd. Det kan sänkas ner helt, så att förflyttning i sidled möjliggörs för brukaren.

ARMSTÖD HEMIPLEGI 9000 PLUS är justerbart i höjdd. Dessa armstöd är dessutom, utan att höjden ändras, svängbara i sidled.

ARMSTÖDSMEKANISM 6100 finns i både vinkelställbart och ej vinkelställbart utförande. Brukaren kan själv justera armstöden i höjd och bredd.

De fällbara armstöden kan även fällas bakåt, vilket möjliggör sidoförflyttning på ett enkelt sätt.

ARMSTÖDSMEKANISM 6100 HEMIPLEGI uppstår vid komplettering av armstödsmekanism 6100 med hemiplegi mekanismen för fällbara armstöd (nr 56).

Även i detta fall så ger denna funktion svängrum i sidled.



57



58



59



60



61



62



63




64



65



66

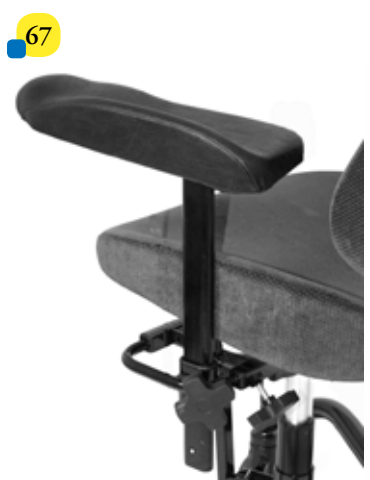

67



68

Nr Armstödsplattor

52 Blandade armstödsplattor

Kontakta Mercado, eller se broschyren 'Sittsystem' för mer information om armstöd.

Nr Armstödsplattor

Nr	Armstödsplattor	Art.nr
53	Armstödsplatta Mini	25 cm AR111038 30 cm AR112038
54	Armstödsplatta ErgoMedic	25 cm AR101038 30 cm AR102038 35 cm AR103038 40 cm AR104038
55	Armstödsplatta Mobil	25 cm AR301038 30 cm AR302038 35 cm AR303038 40 cm AR304038
56	Armstödsplatta Comfort	30 cm AR502038 35 cm AR503038 40 cm AR504038
57	Armstödsplatta ErgoMedic PLUS	
	42 cm	Hö AR205138 Vä AR205238
	30 cm	Hö AR202138 Vä AR202238
58	Armstödsplatta Hemiplegi	AR406038

Vid färgval på stoppdetaljer se www.mercado.se eller kontakta Mercado för mer information.

Nr Armstöd

59 Breddbåge 9000 PLUS


Hö 802698
Vä 802699

Breddbågen passar till 9000 och Hemiplegi. Komplettera med lämpligt armstöd.

60	Hemiplegi mekanism f fallbara armstöd	Par	802991
		Hö	802989
		Vä	802990
61	Armstöd 9000 25-40 h: 32 cm (till ej vinkelställbart std)		800830
	Armstöd 9000 PLUS Hö, 32 cm		802700
	Armstöd 9000 PLUS Hö, 38 cm		802701
	Armstöd 9000 PLUS Vä, 32 cm		802702
	Armstöd 9000 PLUS Vä, 38 cm		802703

För info om armstöd för vajerreglage, kontakta Mercado eller se Mercados hemsida www.mercado.se.

62	Armstöd hemiplegi 9000 PLUS Hö, 32 cm		802992
	Armstöd hemiplegi 9000 PLUS Vä, 32 cm		802993
63	Armstödsmechanism 6100 Vä, ej vinkelställbart		600125
	Armstödsmechanism 6100 Hö, ej vinkelställbart		600126
64	Armstödsmechanism 6100 Vä, vinkelställbart		600169
	Armstödsmechanism 6100 Hö, vinkelställbart		600170
65	Armstöd 9000 PLUS med armstödsplatta ErgoMedic		
66	Armstöd Hemiplegi 9000 PLUS med armstödsplatta hemiplegi		
67	Armstöd 9000 PLUS med armstödsplatta ErgoMedicPLUS		
68	Armstödsmechanism 6100 med armstödsplatta Mobil		

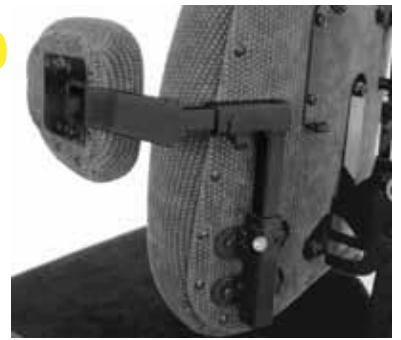

70



71



69

MÅNGA TILLBEHÖR GER ÖKAD FLEXIBILITET

Bålstöd

Bålstöd används för att få ett mer upprätt och aktivt sittande. Mercado har tre typer: Sväng och ställbara, raka och svängda bålstöd.

Höftbälte

Ett bälte som förhindrar brukaren från risken att falla ur stolen framåt. Finns i storlek S 51-71 cm, M 68-83 cm och L som har en inställbar längd på 83-103 cm.

Amputationsstöd

Ett amputationsstöd hjälper till att hålla benet i en korrekt position och är utformat för att på det mest bekväma sätt vila det amputerade benet i. Amputationsstöd finns för både höger och vänster ben och monteras med ett fäste under sitsen.

Grenkil

Grenkil/Knädelare används när man vill förhindra att knäna går emot varandra, den ger ökad stabilitet och förbättrad sittställning.

Grenkilarna finns i två storlekar 11 cm och 15 cm. Grenkilmekanismen finns tillgänglig i tre längder, "Barn" 57 mm, "Vuxen" 115 mm och 175 mm.

Bord

En rökfärgad genomskinlig makrolonskiva med sidokanter. Bordet är uppfällbart och kompatibelt med hela REAL 9000 programmet.

Det är 60x45 cm i måtten och fästs på höger armstöd.

Bricka

Brickan för avlastning är av trä och har måtten 45 x 30 cm. Den vrids i sidled och kan fästas på valfri sida av stolens armstöd.

Även denna är kompatibel med REAL 9000 programmet.



■ Tillvalet passar även till REAL 6100

Nr	Bålstöd och tillhörande kuddar	Art.nr
69	Bålstödsmechanism sväng och ställbar Tillhörande kudde st (sväng och ställbar)	801768 TS2038
70	Bålstödsmechanism rak båge Par	801772
71	Bålstödsmechanism svängd båge Par Kudde st (grå plysch)	801674 TS1046
Nr	Grenkil (11 och 15 cm)	Art.nr
72	Grenkils kudde (svart konstläder) 11 cm 15 cm	LD1038 LD2038
73	Grenkilsfäste 57 mm klp 115 mm kpl 175 mm kpl	801843 801844 801845
Nr	Bord	Art.nr
74	Bord rökfärgat 60x45 cm*	802755
75	Bricka 45x30 cm med fäste	802122

Nr	Höftbälte	Art.nr
76	Höftbälte inkl. fästen och skruvar	
	S (51-71 cm)	802296
	M (68-83 cm)	802297
	L (83-103 cm)	802298
	Höftbälte utan fäste	
	S (51-71 cm)	800952
	M (68-83 cm)	800953
	L (83-103 cm)	800954
	Fäste till höftbälte Par	800878
Nr	Amputationsstöd	Art.nr
77	Amputationstödsmechanism	800827
	Fäste	800786
	Amputationstöds kudde (grå plysch)	AS1046

Vid färgval på stoppdetaljer se www.mercado.se eller kontakta Mercado för mer information.

*På REAL 6100 kombineras med ej fällbara PLUS-armstöd.

78



79



80



81



82



83



84



85



STOPPDETALJER & ELEKTRISKA REGLAGE

Nackstöd

Nackstöd ger stöd åt huvudet för att få rätt sittställning samt ger avlastning för nacke/rygg vid dålig bålkontroll. Det kan enkelt justeras för optimal inställning. Finns med plan-, skålad- och ErgoMedic PLUS kudde.

Sidostöd

Sidostöd ger brukaren hjälp att bibehålla stabilitet och position. Används även som lårstöd varvid fötterna får bättre stöd på fotplattor alternativt golv och man undviker att benen glider isär. Kan ställas i höjd och bredd alternativt vändas bak och fram. Finns i tre storlekar. S, M och L.

Sitthöjning/sittfällning

Kan placeras under armstöd, på ryggen i reglage med lös dosa eller regleras via en joystick. Fjärrkontroll passar utmärkt för klinikbruk.

Elektrisk broms

Denna broms förenklar bromsning för de som har problem med den manuella bromsspaken.

Den är utformad som en röd knapp och sitter på utsidan av den elektriska höj-/sänkfunktionen under ena armstödet. Ett enda knapptryck sköter om hela bromsningsproceduren.

Klädsel

Stolen levereras klädd i plysch, konstläder eller vävt mönstrat tyg som finns i olika färger. Det finns även praktiska, maskintvättbara överdrag till alla stoppdetaljer.

Överdrag

Överdragen skyddar klädseln från smuts och damm, samtidigt som det förlänger livslängden på stolens klädsel. Inkontinensöverdrag är en snabb och enkel lösning om man vill skydda sisten mot väta. Överdrag i olika färger finns till alla stoppdetaljer.

Vid val av överdrag se www.mercado.se eller kontakta Mercado för mer information.



■ Tillbehöret passar även till REAL 6100

Nr Stoppdetaljer

78 Överdrag finns till alla stoppdetaljer

Se www.mercado.se el kontakta Mercado för mer info om överdrag till stoppdetaljer.

Nr Nackstöd

Nr	Nackstöd	Art.nr
79	Nackstöds kudde plan, 29x16 cm	NS1046
80	Nackstöds kudde skålad, 31x18 cm	NS3046
81	Nackstöds kudde ErgoMedic PLUS 30x23 cm	NS2046
82	Nackstöds mekanism universal	
	S (h 28 cm)	800824
	M (h 38 cm)	800775
	L (h 48 cm)	802768
83	Nackstöds mekanism PLUS sidostöddjusterbar	
	S (h 28 cm)	802775
	M (h 38 cm)	802776
	L (h 48 cm)	802777

Nr Sidostöd

Nr	Sidostöd	Art.nr
84	Sidstöds fäste PLUS, Hö	802960
	Vä	802961
	Par	802874

85 Sidstöds kudde, XS (15x8)

S (28x8 cm)

M (25x14 cm)

L (30x16 cm)

SS1046





SS2046

SS3046

SS4046

Nr Eldetaljer

Nr	Eldetaljer	Art.nr
86	Elreglage i lös dosa (1 funktion)	802739
87	Elreglage i lös dosa (2-4 funktion)	802740
88	Fjärrkontroller, multi (2-4 funktion) upp/ner (1 funktion)	801808 801806
89	Joystick för El-stol m bromsknapp, 2-funkt	802742
	3-funkt	802743
90	Laddbox, 1-funktion	802212
	4-funktion	802213
91	Elreglage monterad under armstöd PLUS Manöverbox f upp/ner+ladd m kablage för reläkort	802998
92	Fotkontakt för El höjning/sänkning	802688
93	Batteriladdare till El-stol	802289

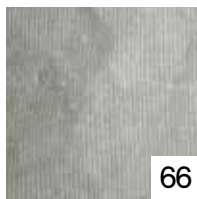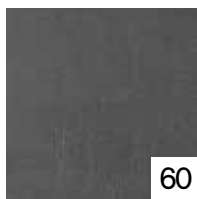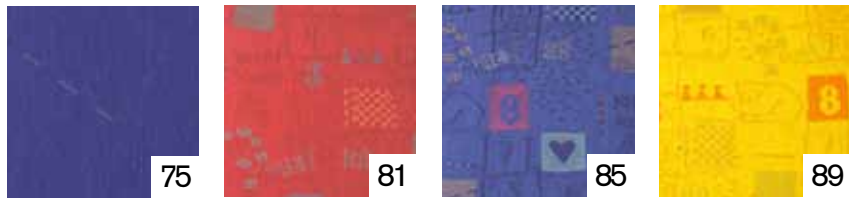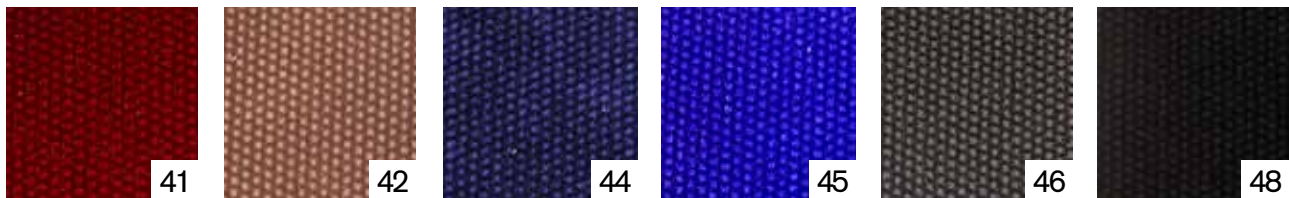

FÖRKLARING TILL STOPPDETALJERS ARTIKELNUMMER
Art.nr: ST101546 = "Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"

Siffror 1-2 = Typ av stoppningsartikel (ST=sits, BR=ryggplatta etc.)
 Siffror 3-4 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)
 Siffror 5-6 = Storlek
 Siffror 7 = Material (plysch, konstläder etc.)
 Siffror 8 = Färg

KLÄDSLAR

Plysch

41 Vinröd 42 Brun 44 Marin 45 REAL-blå 46 Grå 48 Svart

Konstläder

31 Röd 32 Brun 35 Blå 36 Grå 38 Svart

Väv mönstrad Vuxen

75 Blå

Väv mönstrad Barn

81 Röd 85 Blå 89 Gul

Alternativ klädsel

60 Hygienväv 95 Utan klädsel

Överdragsklädsel

66 Inkontinensöverdrag grå plastad frotté 73 Barn/Gul bomull 74 Barn/Blå bomull

Överdrag går att få till samtliga av Mercado Medics stoppdetaljer, gå in på www.mercado.se eller kontakta oss för mer information.



Mercado Medic AB
 Tryffelslingan 14
 181 57 Lidingö

Telefon & Fax
 Tel 08 555 143 00
 Fax 08 555 143 99

Email & Internet
 Email info@mercado.se
 Internet www.mercado.se